


SAFEWAY 500 SNABBGUIDE

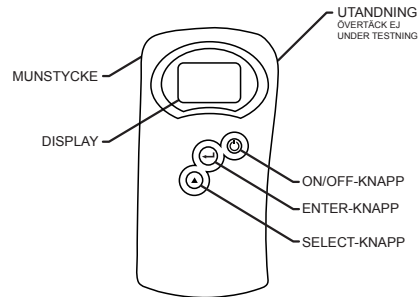

För att bläddra mellan olika menyalternativ, välj SELECT-knappen ⏸.

SAFEWAY 500 ÄR AVSEDD FÖR ATT MÄTA ALKOHOLHALTEN I EN PERSONS UTANDNINGSLUFT UTTRYCKT I PROMILLE.

KÖR INTE ALKOHOLPÅVERKAD!!!

Leverantören fräntar sig allt ansvar för trafikolyckor som beror på onykter körning vare sig personen har använt alkotestare eller inte.

Se till att läsa igenom hela användarmanualen och följ procedurerna noggrant för att erhålla bästa resultat.

Användningsinstruktioner:

Vänta 20 minuter efter att testpersonen har rökt, intagit mat eller dryck, innan test genomförs, för att inte ge felaktigt resultat.

Steg 1) Tryck och håll inne ON/OFF-knappen ⏻ under 1 sekund tills du hör ett pip. Enheten visar "Initializing..." medan den förbereder för användning.


Steg 2) Skärmen visar "Test" och "Options". För att starta ett "Test", tryck in ENTER-knappen ⏻. Enheten visar "Blow now". Ta ett djupt andetag, slut slut läpparna om munstycket, blås med en jämn luftström under fem (5) sekunder. Enheten piper när testpersonen börjar blåsa, och piper igen efter att provet har erhållits. Täck inte över hålet BREATH OUT.

Steg 3) Enheten visar "Processing" medan den analyserar provet. Efter cirka tre (3) sekunder visar enheten det uppskattade promille-värdet.

Steg 4) Enheten visar testresultatet under 90 sekunder innan den piper två gånger och stängs av.

Steg 5) För att stänga av enheten, tryck och håll inne ON/OFF-knappen ⏻ under 1 sekund.

SAFEWAY 500 MINIGUIDE

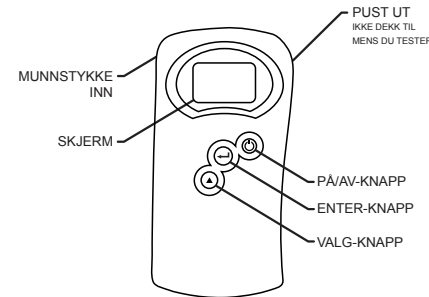

For å trykke deg gjennom de ulike menyvalgene, trykker du på SELECT-knappen ⏸.

SAFE WAY 500 ER LAGET FOR Å MÅLE ALKOHOL I MENNESKERS PUST.

IKKE KJØR I PÅVIRKET TILSTAND!

Leverandører frasier seg alt ansvar for trafikkulykker som kommer av kjøring i påvirket tilstand uansett om personen har brukt alkotester eller ikke.

Les hele bruksanvisningen og følg instruksjonene nøye for å oppnå optimalt resultat.

Instruksjoner for bruk:

Vent til det har gått 20 minutter etter at testpersonen har røykt, spist eller drukket før testing.

Trinn 1) Trykk og hold PÅ/AV-knappen ⏻ i ett sekund til du hører en pipelyd. Du kan lese "Initializing..." på apparatet mens det klargjøres for bruk.


Trinn 2) Skjermen viser "Test" og "Options". For å begynne en "Test" trykker du på ENTER-knappen ⏻. Apparatet viser "Blow now". Pust dypt inn, fold leppene rundt det nye munstykket og blås jevnt i fem (5) sekunder. Apparatet piper når testpersonen begynner å blåse og piper igjen når den har fått en prøve. Ikke dekk til BREATH OUT- hullet.

Trinn 3) Apparatet viser "Processing" mens det analyserer prøven. Etter omtrent tre (3) sekunder viser apparatet målt promilleverdi.

Trinn 4) Apparatet viser testresultatet i 90 sekunder før det piper to ganger og skrur seg av.

Trinn 5) For å skru av enheten, trykker du på PÅ/AV-knappen ⏻ og holder den inne i ett sekund.

SAFEWAY 500 MINIGUIDE

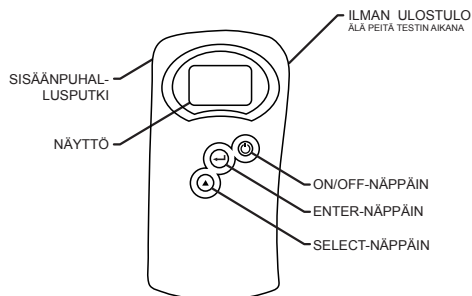

Valikkovaihtoehtoja selataan painamalla SELECT-näppäintä ⏸.

SAFEWAY 500 ON TARKOITETTU ALKOHOLIN MITTAAMISEKSI HENGITYSILMASTA.

ÄLÄ OTA, KUN AJAT!!!

Laitteen toimittaja ei vastaa liikenneonnettomuuksista, jotka johtuvat alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta siitä huolimatta, onko kuljettaja käyttänyt alkometaria tai ei.

Lue käyttäjän käsikirja kokonaan ja seuraa ohjeita tarkkaan luotettavan tuloksen saavuttamiseksi.

Käyttöohjeet:

Ennen testin aloittamista on odotettava 20 minuuttia testihenkilön tupakoinnin, syömisen ja juomisen jälkeen. Ellei näin tehdä, voi laite antaa väärän veren alkoholipitoisuuden ja sensori voi vahingoittua.

Vaihe 1) Pidä ON/OFF-näppäintä ⏻ alhaalla sekunnin, kunnes kuulet piippauksen. Laite valmistautuu käyttöön ja näytössä lukee "Initializing..."


Vaihe 2) Näytössä näkyy "Test" (testi) ja "Options" (valinnat). Aloittaaksesi testauksen paina ENTER-näppäintä ⏻. Näytössä näkyy "Blow Now" (aloita puhaltaminen). Vedä syvään henkeä, paina huulesi uutta suukappaletta vasten ja puhalla tasaisesti viisi (5) sekuntia. Laite piippaa, kun testihenkilö aloittaa puhaltamisen ja uudelleen, kun laite on saanut näytteen. Ilman ulostuloaukkoa ei saa peittää.

Vaihe 3) Näytössä lukee "Processing", kun laite analysoi näytettä. Noin kolmen (3) sekunnin kuluttua näyttöön ilmestyy veren arvioitu alkoholipitoisuus.

Vaihe 4) Testitulokset näkyvät näytössä 90 sekuntia, jonka jälkeen kuuluu kaksi piippausta ja tulos häipyä näytöstä.

Vaihe 5) Laite suljetaan painamalla ON/OFF-näppäintä ⏻ 1 sekunnin ajan.

SAFEWAY 500 QUICK GUIDE

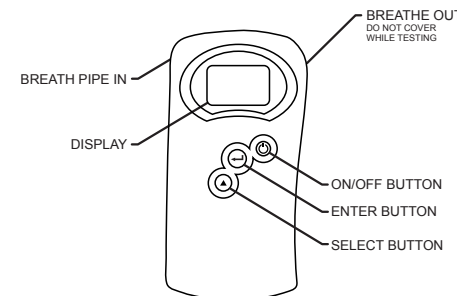

To toggle through available menu options, press the SELECT ⏸ button. See manual for details on the menu options.

THIS DEVICE IS INTENDED TO MEASURE ALCOHOL IN THE HUMAN BREATH.

DO NOT DRINK AND DRIVE.

SEE OWNER'S MANUAL FOR RE-CALIBRATION INSTRUCTIONS THAT MUST BE ROUTINELY PERFORMED.

Be sure to read the entire owner's manual and follow procedures carefully to obtain optimal results.

Operating Instructions

Wait 20 minutes after the test subject smokes, eats or drinks before testing. Failure to wait 20 minutes can give inaccurate readings and damage the sensor.

Step 1) Press and hold the ON/OFF power button ⏻ for one (1) second until you hear a BEEP. The unit reads "Initializing..." as it prepares for use.

Step 2) The screen displays "Test" and "Options". To start a "Test", press the ENTER button ⏻. The unit displays "Take a Deep Breath" for three (3) seconds, beeps, and then displays "Blow Now". Take a deep breath, wrap your lips around the new mouthpiece and blow steadily for five (5) seconds. The unit takes the breath sample in the amount of time set for a breath sample (factory default is 5 seconds). Do not cover the BREATH OUT hole.

Note: Begin blowing immediately when "Blow Now" is displayed to get a deep lung sample.

Step 3) The unit displays "Processing" while analyzing the sample. After about three (3) seconds, the unit then displays the estimated blood alcohol level.

Step 4) The unit shows the test result for 90 seconds before beeping twice and shutting off.

Step 5) To turn off the unit, press and hold the ON/OFF power button ⏻ for one (1) second.